



Biomat

Přírodní Ametystové infračervené záření a Záporné ionty



THE
RICHWAY
GROUP

Richway International Inc.
The Life Corporation
KIHO Corporation Japan
RICHWAY China Corporation
RICHWAY EU Corporation



„Toto je příručka k podložce Biomat.
Podrobně popisuje způsob použití podložky
Biomat, která vydává dlouhovlnné
infračervené záření a záporné ionty.“





R I C H W A Y E U


ŽIVOT S PODLOŽKOU BIOMAT

Historie léčby teplem

Historie zvyšování tělesné teploty pro terapeutické účely je dvacet čtyři století stará.


*„Dejte mi schopnost způsobit horečku
a vyléčím všechny nemoci.“*

Hippokratés (460 př. n. l.)

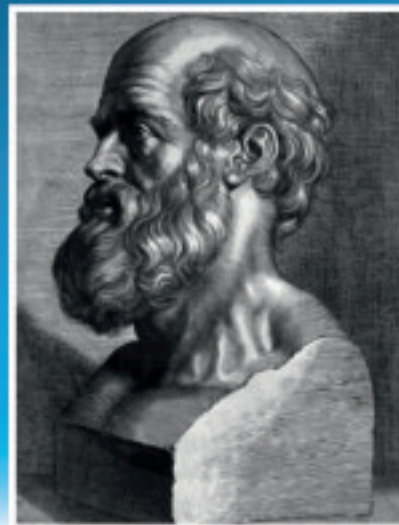



„Kdybych ovládal schopnost vytvářet teplo, dokázal bych vyléčit každou nemoc na světě.“ (Hippokratés, 450 př. n. l.)

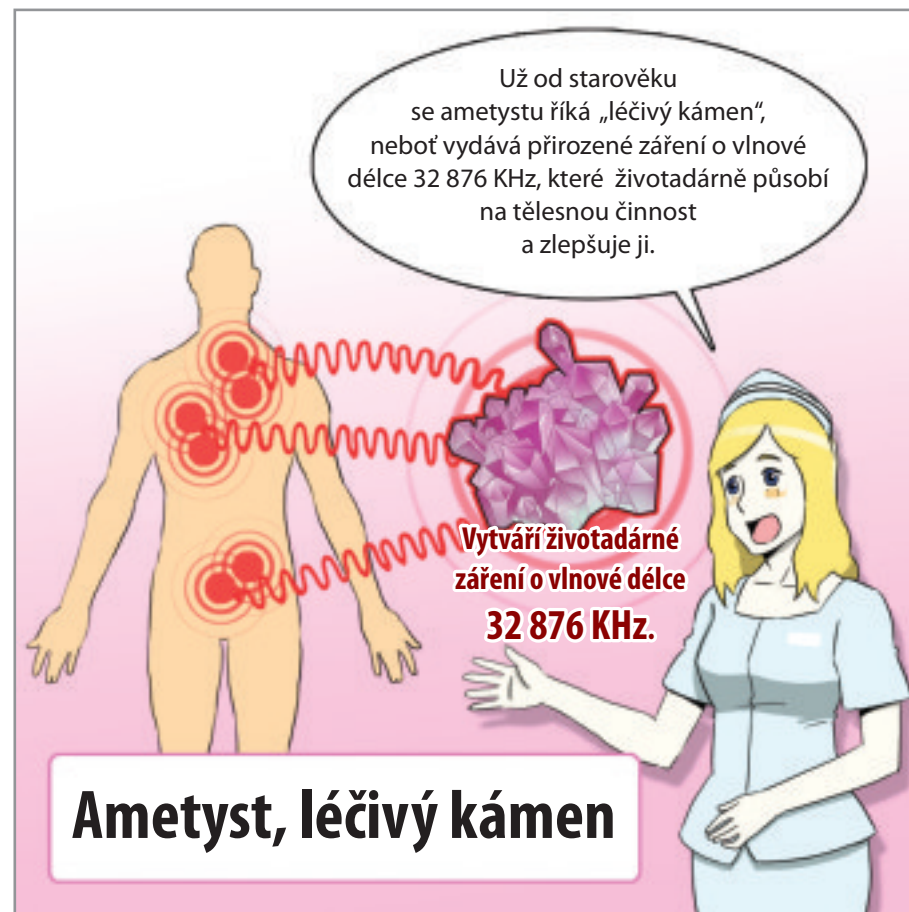

Dlouhovlnné infračerveného záření je nejbezpečnější energie na světě a stejně tak i světlo života (Hwang Sang, MD, 1995)

Typ světla v závislosti na vlnové délce

Každé světlo má vlastní vlnovou délku. Nejkratší vlnovou délku mají paprsky záření gama, přičemž vlnová délka se postupně prodlužuje u rentgenového záření, ultrafialového záření, viditelného záření (0,4–0,7 mm) a konečně hluboko působících dlouhých vln infračerveného záření s vysoce účinnou termoterapeutickou energií.

Ametyst vydává účinnější hluboko působící dlouhovlnné infračervené záření s účinnější termoterapeutickou energií.


Záření gama
(0,00001 M)

Rentgenové záření
(0,00001–0,01 M)

Ultrafialové záření
(0,01–0,4 M)

Viditelné záření
(0,4–0,7 M)

Infračervené záření
(0,7–1000 M)

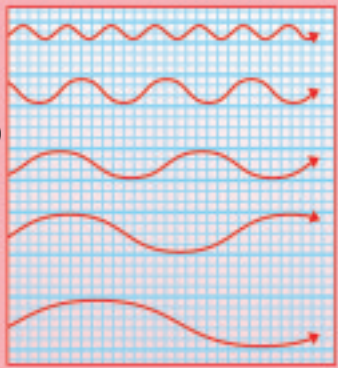

* M=mikron

Dlouhovlnné infračervené záření vydávané ametystem

Teplo

Jaký je tedy rozdíl mezi teplem a dlouhovlnným infračerveným zářením? Vnější teplo obtížně proniká do těla, ale dlouhovlnné infračervené záření může pronikat hlouběji do těla a vytvářet intenzivní třecí teplo, které stimuluje naše buňky k pohybu.

Tyto fotografie zobrazují rozdíl mezi běžnou podložkou a podložkou Biomat s dlouhovlnným infračerveným zářením.

Na běžné podložce **Na podložce Biomat**

Není to jednoduché?

Dobry chirurg má orlí oko, lví srdce a ženskou ruku. (britské přísloví)


Rozdíly mezi běžným dlouhovlnným infračerveným zářením a dlouhovlnným infračerveným zářením z ametystu



Podložka Biomat a symbol Hideo



Symbol Dewa Hideo je znám vydáváním bio-rezonanční energie.

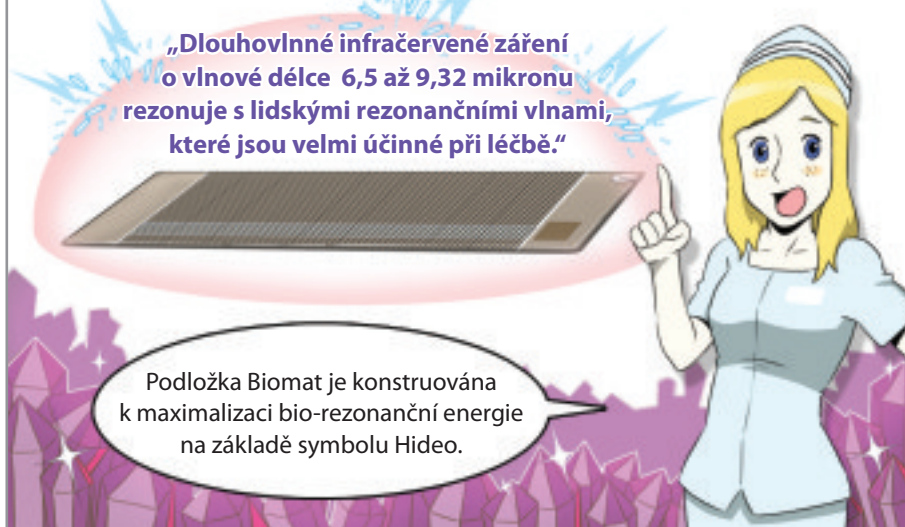

Cvičení je radost. A bez cvičení není žádné radosti (Arnold Schwarzenegger)

Vynikající tepelně izolační vlastnosti podložky Biomat

Biomat zahřívá vaše tělo, které nemůže brzy znovu vychladnout, protože dlouhodobné infračervené záření mění vaši tělesnou konstituci, která tak sama vytváří teplo stimulací mitochondrií v buňkách těla.



Testovací data podložky Biomat společností Telesum v USA

Nízká teplota na temeni (45 °C)		Nízká teplota ve střední části břicha (45 °C)	
čas	teplota	čas	teplota
0 sekund	24,4 °C	0 sekund	24,4 °C
30 sekund	26,6 °C	30 sekund	26,6 °C
60 sekund	24,5 °C	60 sekund	24,5 °C
90 sekund	26,6 °C	90 sekund	26,6 °C
1 hodina	27,6 °C	1 hodina	27,6 °C
Sledujte změnu tělesné teploty po zapnutí podložky Biomat			
2 hodiny	26,1 °C	2 hodiny	33,9 °C
4 hodiny	26,7 °C	4 hodiny	33,8 °C
6 hodin	27,9 °C	6 hodin	34,5 °C
8 hodin	27,3 °C	8 hodin	34,7 °C

Není to úžasné?




Před použitím podložky Biomat

Dva týdny po používání podložky Biomat




Toto je fotografie pacienta, který trpí obtížemi krevního oběhu. Po použití podložky Biomat u něj můžete vidět výrazné zlepšení krevního oběhu. Je to způsobeno tím, že pacient změnil svou tělesnou konstituci, aby sám udržoval vysokou teplotu těla.

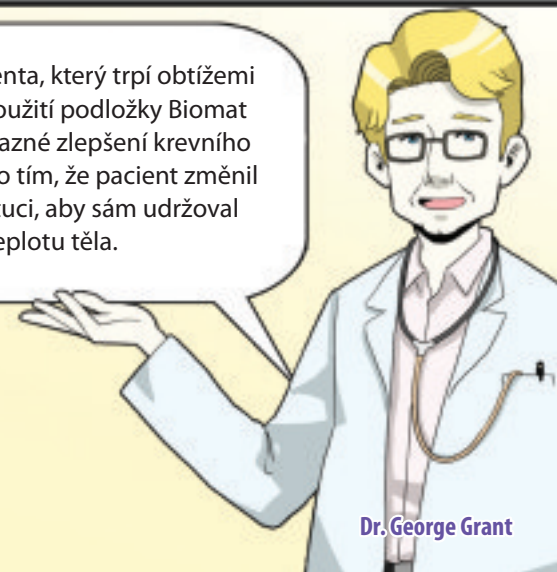


Dr. George Grant

V organismu moderního člověka je přítomno 1000x krát více toxických těžkých kovů než před padesáti lety (The Journal of the American Medical Association, 1974)

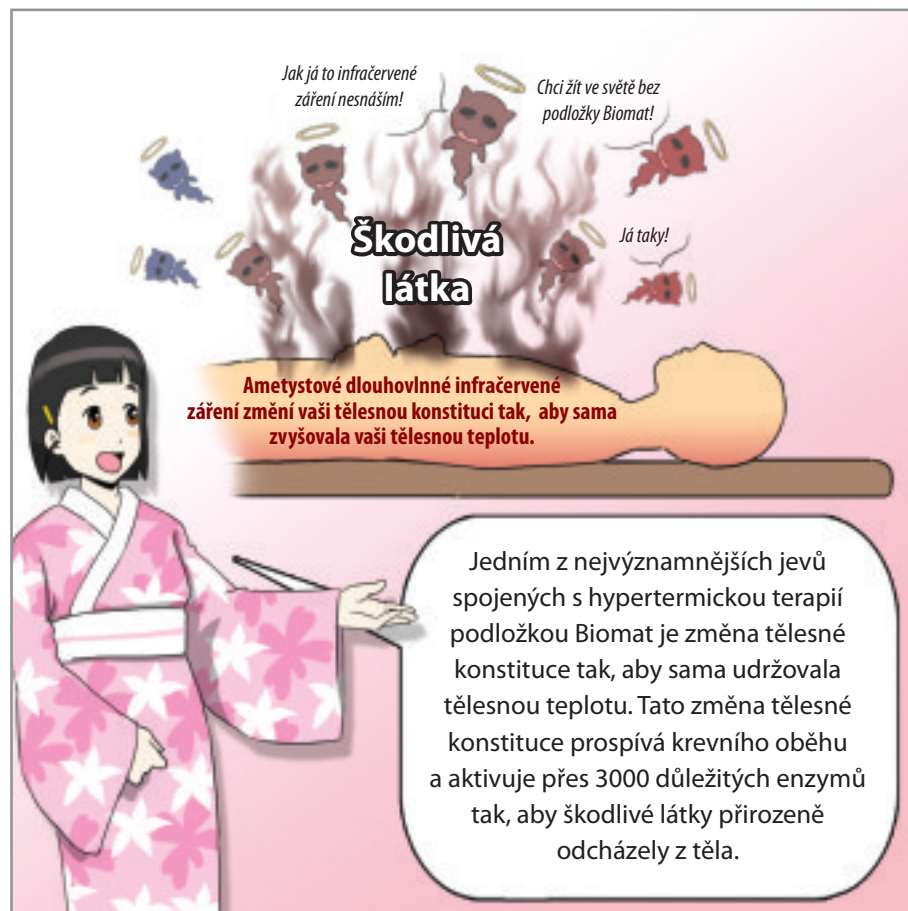


Pročištění krve ametystovými dlouhovlnnými infračervenými paprsky

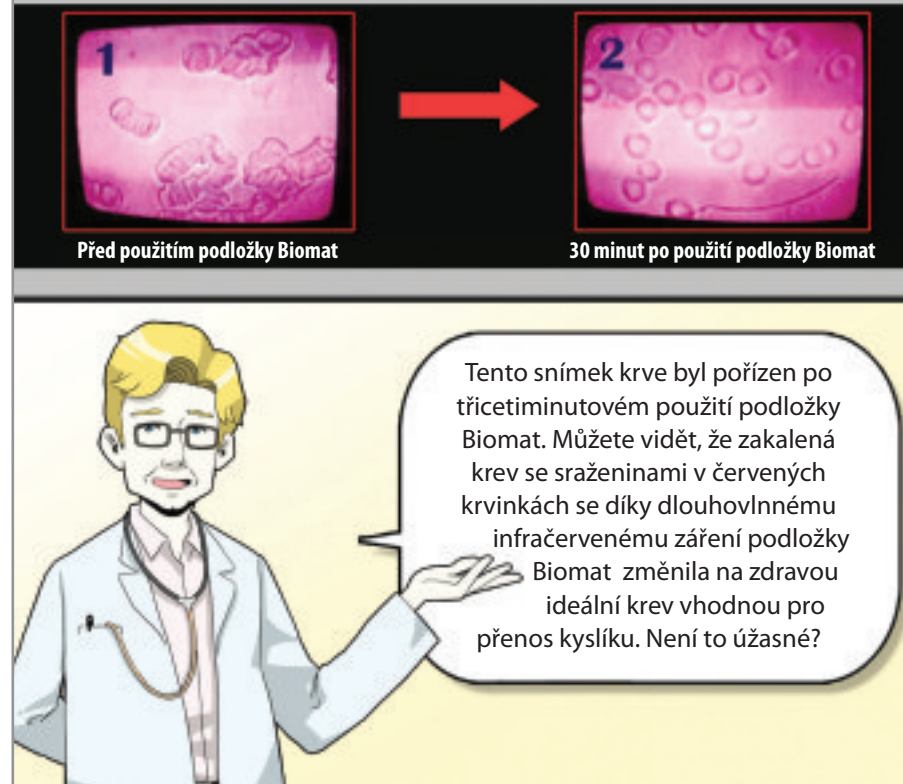


Průměrný dospělý bojuje zarputile s rakovinou šestkrát za život.

Hypertermická funkce podložky Biomat posiluje kardiovaskulární činnost

Před použitím podložky Biomat (29. 5. 2010)

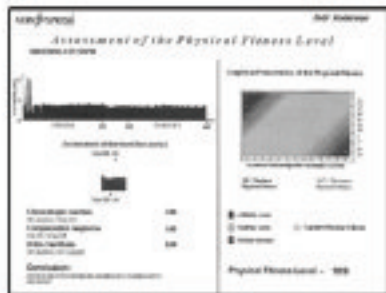

30 minut po použití podložky Biomat (30. 5. 2010)

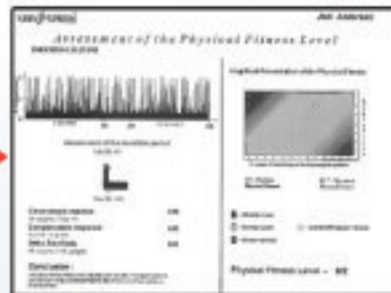


Tento snímek ukazuje srdce padesáti sedmileté ženy. Její zdravotní stav byl velmi špatný. Trpěla sníženou kardiovaskulární funkcí a arytmií.

Avšak pouhé tři minuty po použití podložky Biomat se její kardiovaskulární funkce výrazně zlepšily.

Při poklesu teploty se zhorší funkce imunitního systému

Všechny nemoci mají původ v nižší tělesné teplotě. Toto snížení tělesné teploty se nazývá „přecitlivělost na chlad“. Symptomy přecitlivělosti na chlad jsou chladné ruce a nohy, které jsou daleko od srdce a celkový pokles tělesné teploty.

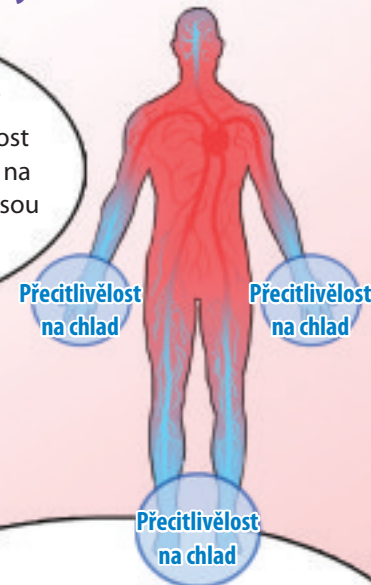

Zvláště když klesá teplota rukou a nohou kvůli klesající vnější teplotě, stáhnou se terminální cévy, což omezuje celkový krevní oběh.

„Zničit všechny zlé bakterie a uklidit nepořádek“, to je celodenní práce imunitního systému.


Pokud vaše tělesná teplota klesne o 1 °C, zhorší se vaše životní funkce



I když vaše tělesná teplota klesne o pouhý 1 °C, životně důležité funkce vašeho těla nemůže plnit více než 3000 základních enzymů.




Pokud vaše tělesná teplota vzroste o 1 °C, potom se aktivita enzymů zvýší o zhruba 40 %

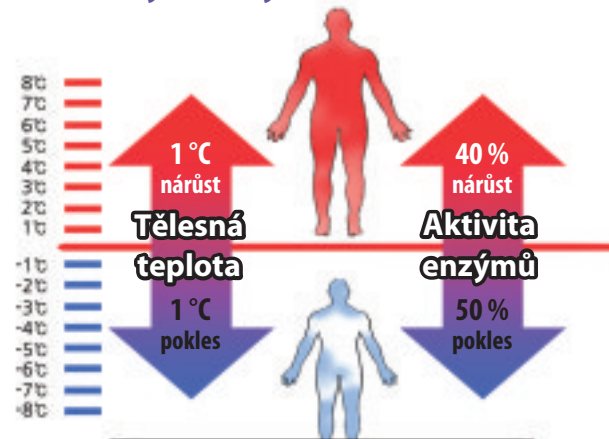

Pokud vaše tělesná teplota vzroste o 1 °C, potom se aktivita enzymů zvýší o více než 40 %. Na druhé straně, pokud vaše tělesná teplota klesne o 1 °C, potom se aktivita enzymů sníží o 50 %. Jinými slovy, lidé trpící přecitlivělostí na chlad jsou kvůli oslabenému imunitnímu systému náchylnější k onemocněním.

Imunitní systém vyhledává a ničí veškeré buňky, které nepomáhají při plnění obvyklé fyziologické činnosti.


Vaše tělesná teplota by v průměru měla překračovat 36 °C

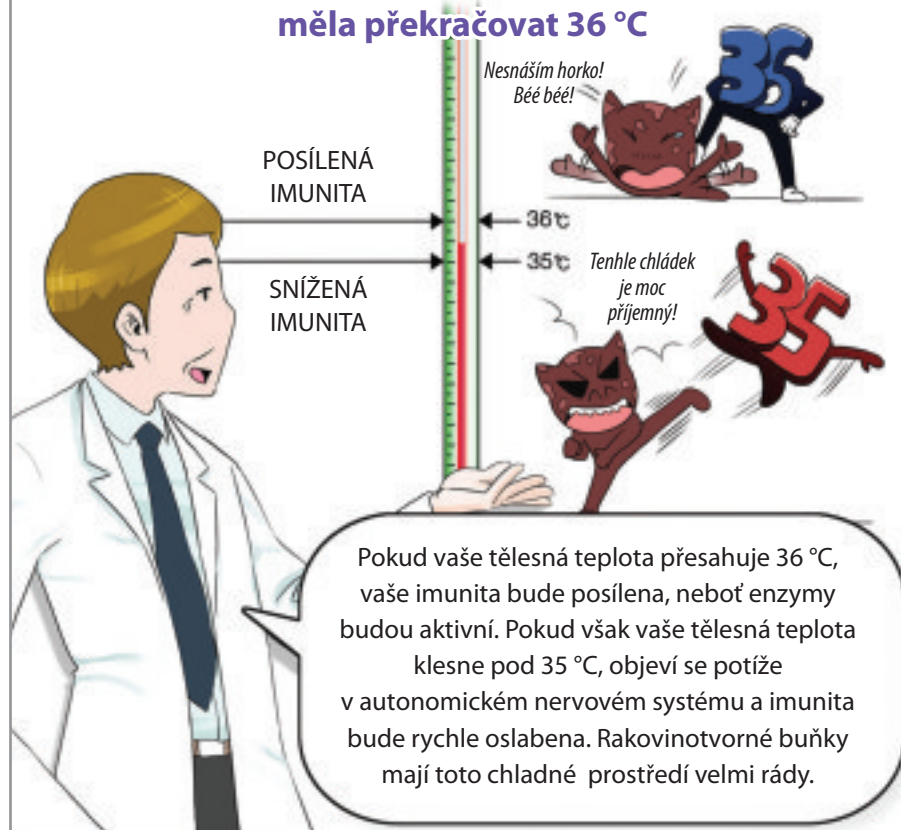


Zpráva Harvardské Lékařské Fakulty





Lepší činnost
enzymů díky vyšší
teplotě těla

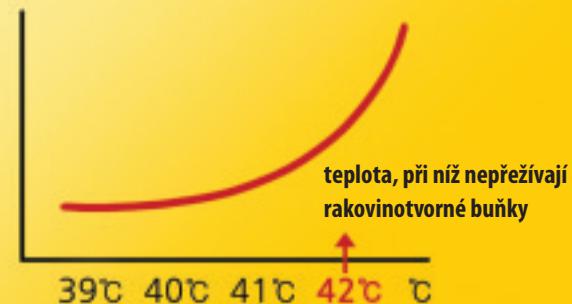

Harvardská lékařská fakulta zjistila, že rakovinné buňky jsou citlivé na teplo a hynou při teplotách nad 42 °C, a proto zvýšení tělesné teploty oslabí aktivitu rakovinných buněk.

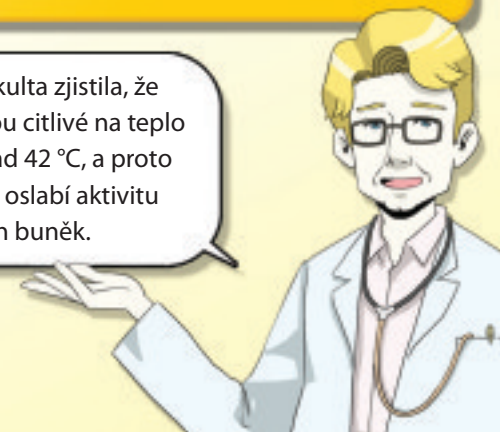


Každý den se vaše buňky dělí dvou miliardkrát.

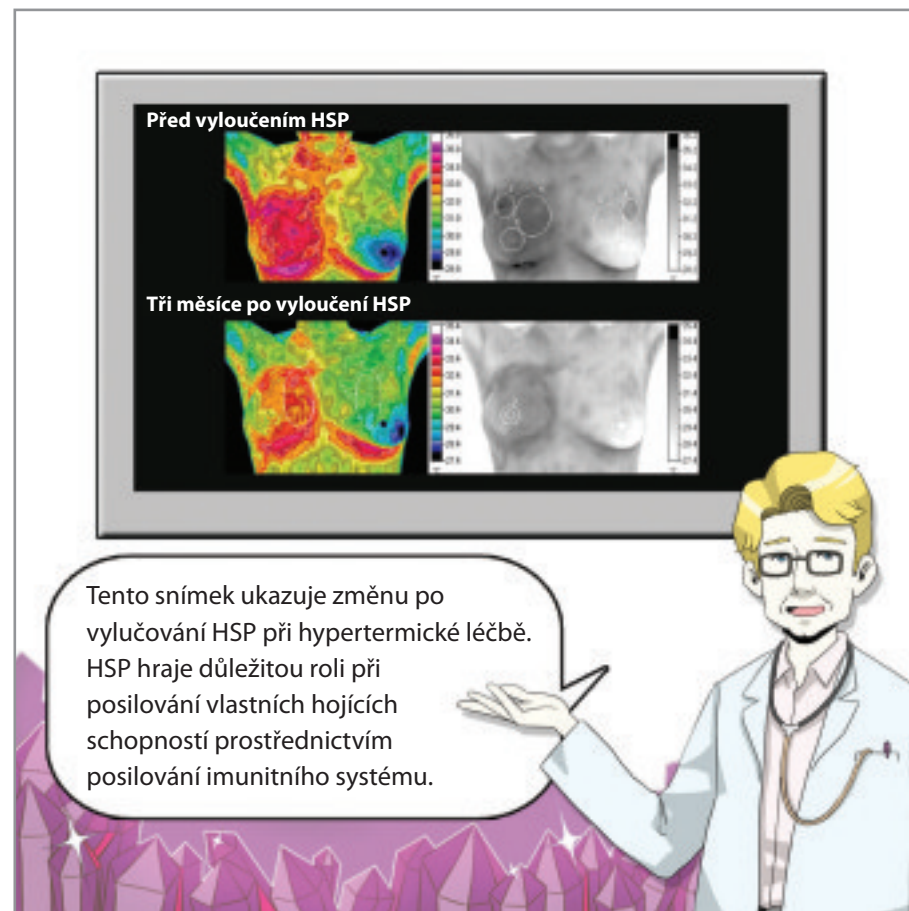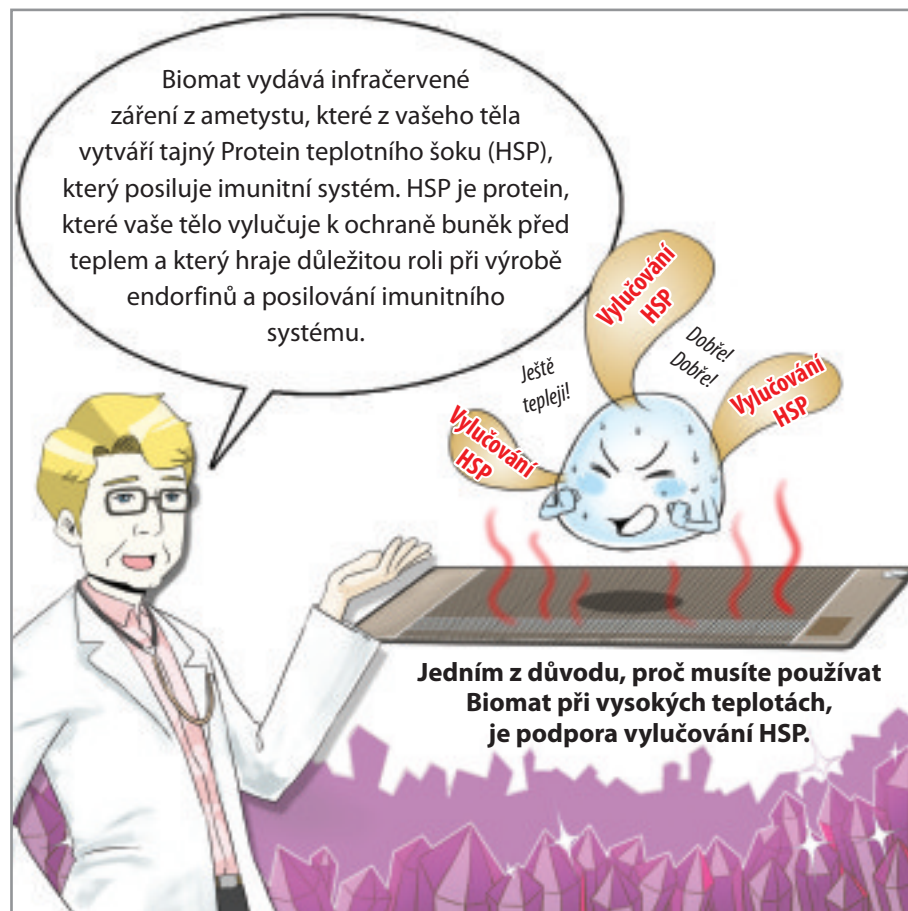

Stravovací návyky, které neustále zvyšují hladinu glukózy v krevním řečišti se podobá snaze uhasit požár, zatímco někdo ve stejném okamžiku lije na stromy benzín. (Lorraine Day, MD, 1984)

HSP zvyšuje tvorbu endorfinů, NK buněk, T buněk a lymfocytů

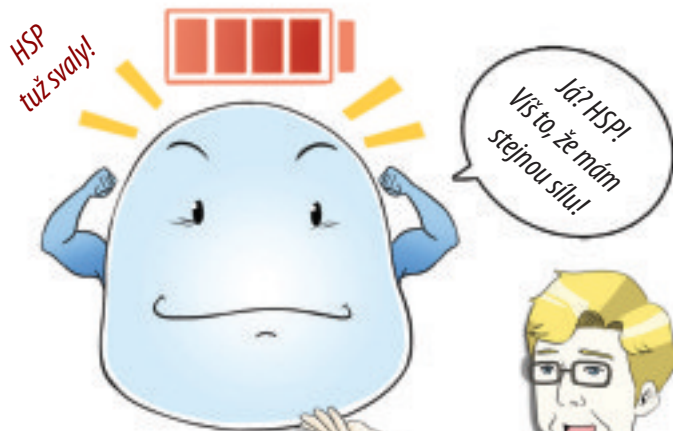


HSP má obecně trojí účinek:

1. Posiluje imunitní systém
2. Obnovuje fyzickou sílu blokováním únavy
3. Napomáhá vylučování endorfinu, látky, která ulevuje od vnitřní bolesti

Biomat snižuje stresové hormony o 78 %

Magnetická rezonance, elektroencefalogram, elektrokardiogram, krevní kortizol

Hladina (mcg/dl)	Výsledky před testem před použitím Biomat	Výsledky po testu po použití Biomat
Magnetická rezonance (0–100)	88	34
Elektroencefalogram (100–10000)	575	285
Elektrokardiogram (1–10)	2	5
Krevní kortizol (5–25)	16	3

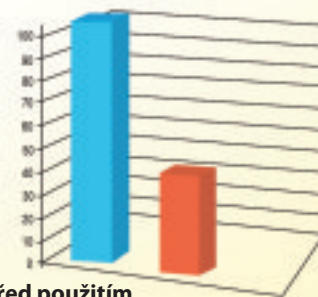


Před použitím Po použití



Po experimentu, při němž 12 pacientů používalo podložku Biomat po dobu jedné hodiny denně, jehož cílem bylo zjistit, zda Biomat dokáže účinně snižovat hladinu stresu, výsledky ukázaly, že stresové hormony, včetně kortizolu, se snížily o 78 %.

Zpráva z klinické zkoušky kanadského lékaře George Granta.



Pokud se nedokážete zbavit stresu, bojujete proti nemoci se svázanýma rukama.

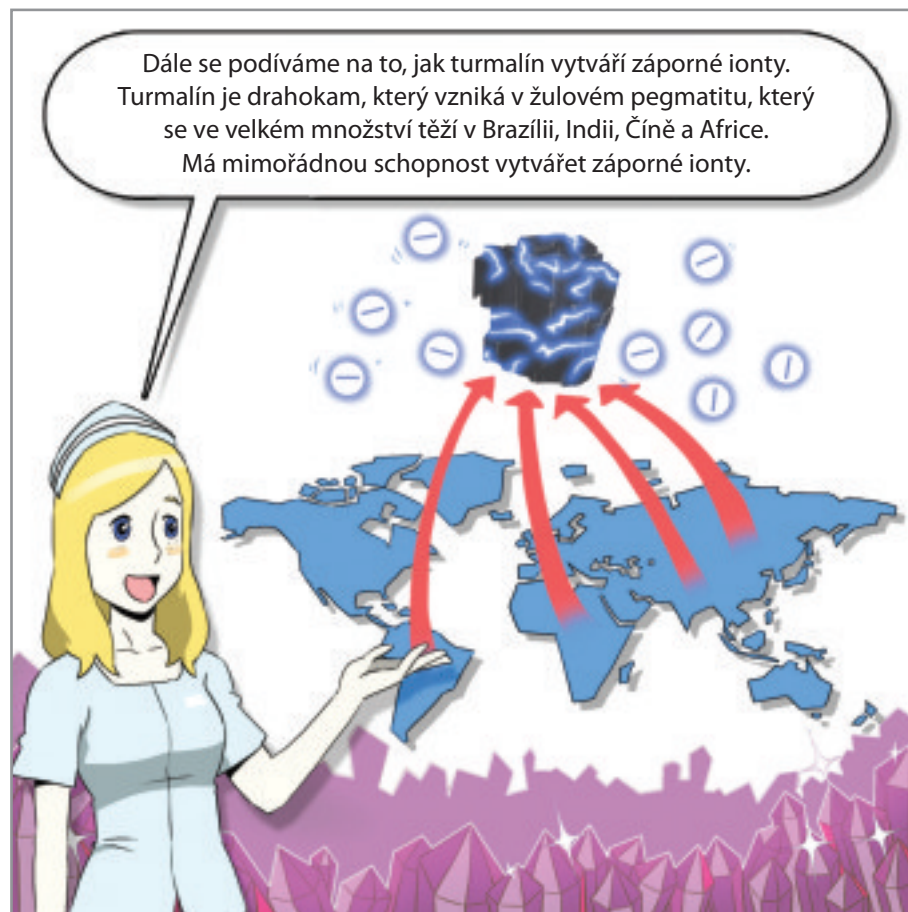

Lidé na sebe nakládají stres sami. Člověk se koneckonců může obejít bez pocitů, jako je nenávisť, sprostáctví, posedlost a sobeckost.




Pouze tehdy, když zažijete pocit potěšení, vášně, vděčnosti a odměny, jste od Boha obdařeni životem.

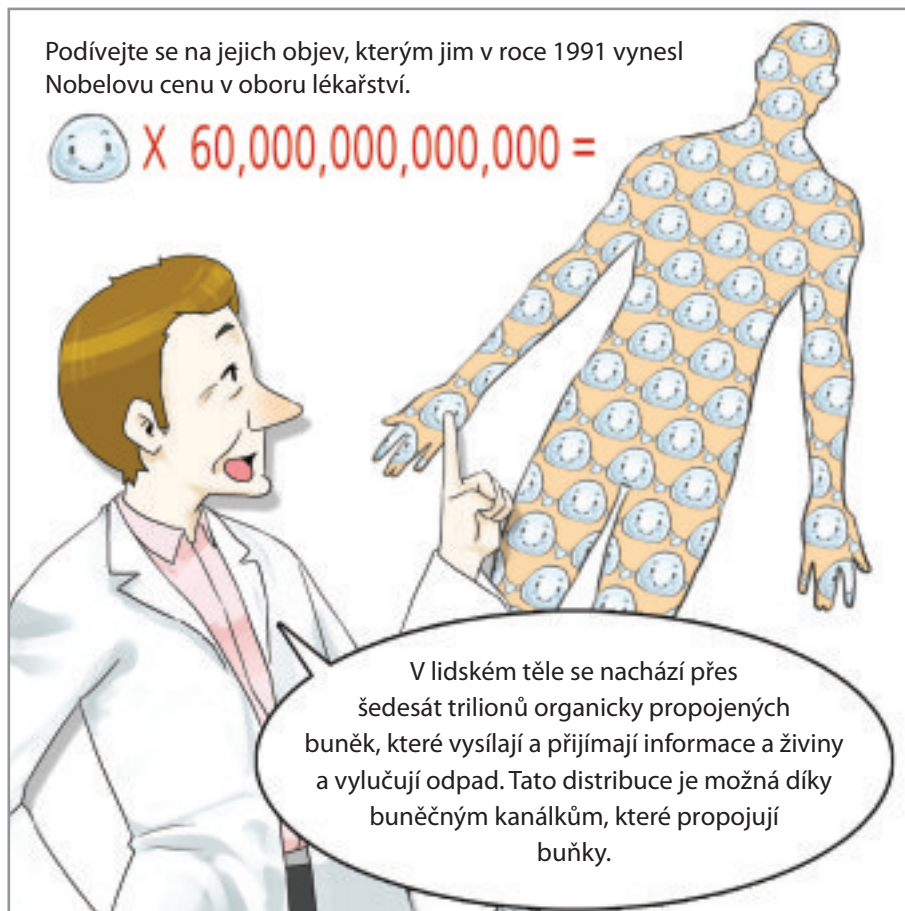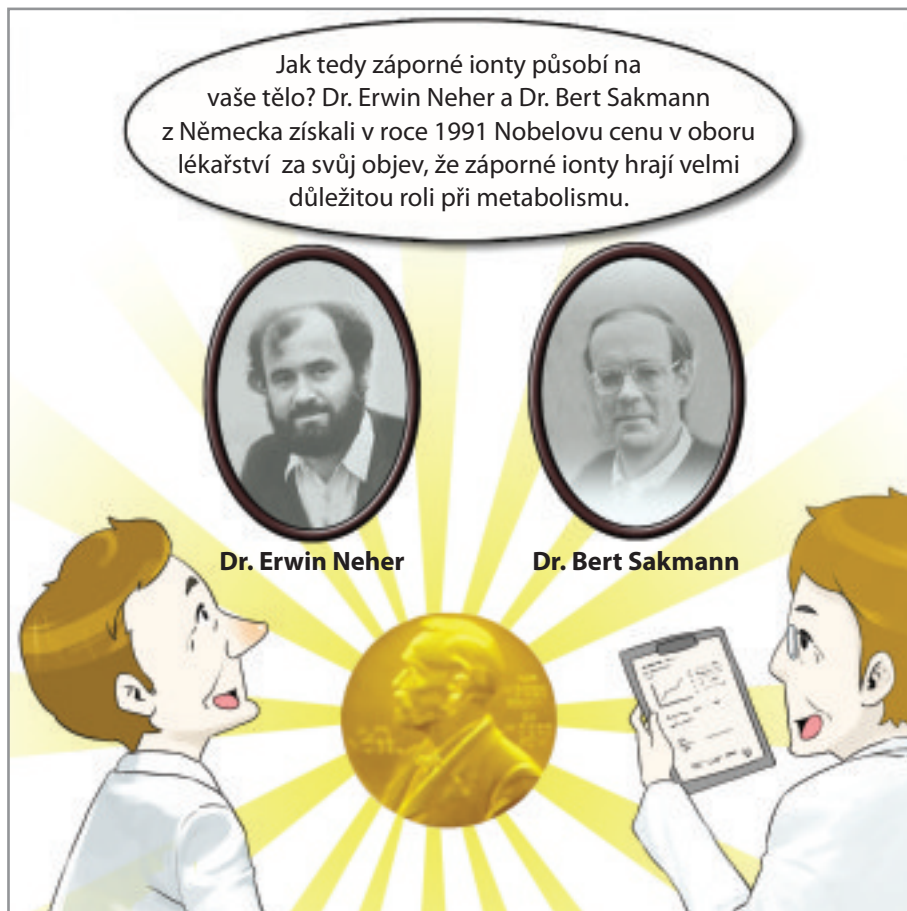

Užívejte si krásu, hudbu, smích a radost kolem vás.


Bez záporných iontů se vaše buněčné kanálky neotevřou

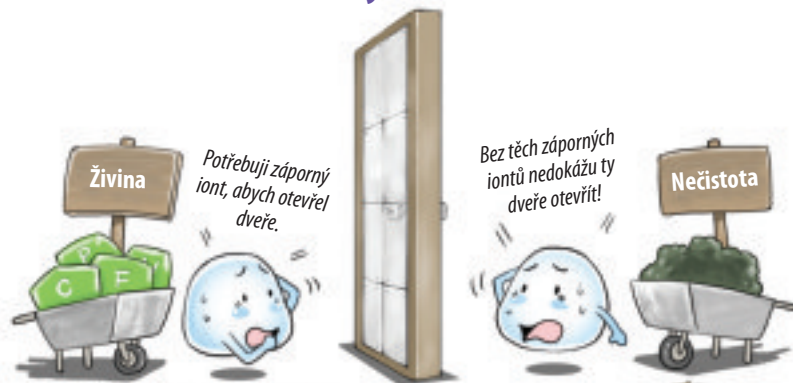

Pokud však nejsou v buňkách žádné záporné ionty, kanálky se uzavřou. Proto nemohou živiny zásobovat všechny části vašeho těla, a proto se omezí aktivita buněk s následnou zvyšující se bolestí.

Současně nebude vylučován odpad a bude se hromadit v těle, což negativně ovlivní vaše zdraví.

Až váš mozek zachytí elektrické signály kladných iontů, ucítíte bolest. Záporné ionty vytvářené podložkou Biomat bude tělo vstřebávat při dýchání, nebo skrz pokožku. Podpoří buněčný metabolismus, zlepší vaši vitalitu, ulehčí vám od bolesti a bude distribuovat různé živiny a energii po vašem těle. Také pročistí krev, bude mít uklidňující účinek. Jsou vhodné i pro odbourání únavy.

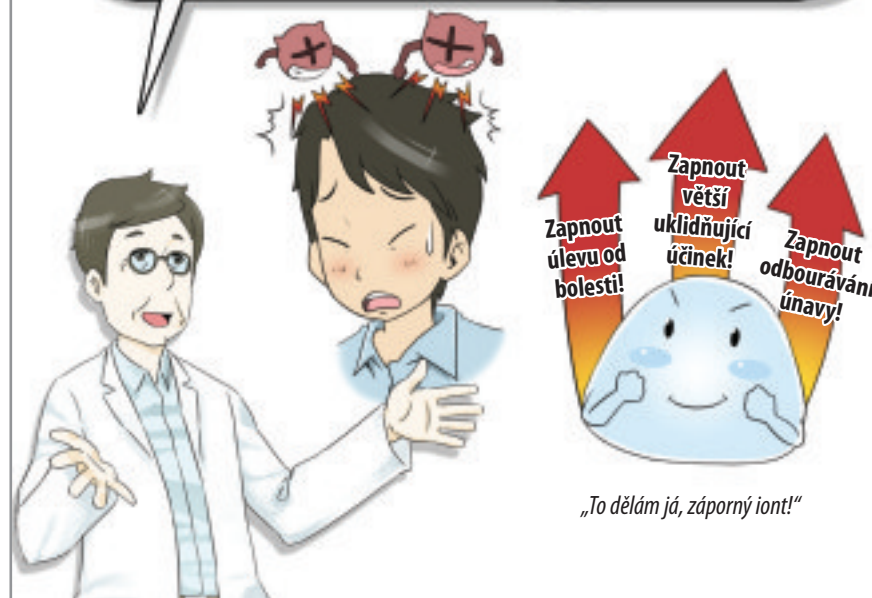

Nakonec je láska, kterou berete stejná jako láska, kterou dáváte. (Abbey Road, 1969)

Součásti podložky Biomat

Podložka



Ovladač



Povlak



Polštář*



Taška
na přenášení



**Polštář je třeba koupit zvlášť*

Teď se podíváme, co všechno balení obsahuje. V krabici najdete rohož, ovladač, podložku a tašku na přenášení. Dále si také můžete dokoupit polštář.

Druhy podložky Biomat

Velikosti king a queen



Jednolůžko



Profesionální velikost (BMP)



Mini



Řada Biomat se dodává následujících velikostech: king, queen, jednolůžko, profesionální (BMP) a mini. Velikosti king a queen size a jednolůžko jsou určeny pro použití na standardních lůžkách, ...

... zatímco profesionální (BMP) velikost je určena pro intenzivní hypotermickou léčbu a je ideální pro nemocniční nebo masážní lůžka. Mini podložku lze snadno s sebou vozit na cesty nebo používat v křesle. Současně se používá jako přikrývka pacienta při hypertermické léčbě.

Buňky s vámi komunikují a plní vaše povely, proto k nim mějte vřelý vztah.

Jak používat ovladač Biomatu

Ted' se podíváme,
jak používat ovladač.



Na displeji ovladače se zobrazuje ukazatel teploty. Levá strana displeje ukazuje stupně Celsia a pravá strana stupně Fahrenheita. Dále je zde ukazatel dlouhovlnného infračerveného záření, ukazatel elektromagnetického příjmu a v ovladači zabudovaný poplašný systém. Na pravé straně je hlavní vypínač, tlačítka pro ovládání teploty a tlačítka nastavení času.



Ovladač Biomat je navržen k bezpečnému ovládání tvorby dlouhovlnného infračerveného záření a záporných iontů s pomocí jednoduchého přepínače.

Nemoci, které nelze léčit správnou stravou, nelze vyléčit žádným jiným lékem. (Hippokratés, 450 př. n. l.)

Nejprve připojte podložku k ovladači




Připojte mini podložku k ovladači



Příčinou nemocí je úzkost a hněv. (francouzské přísloví)

U velikostí King a Queen lze nastavit a kontrolovat teplotu nezávisle na levé či pravé straně

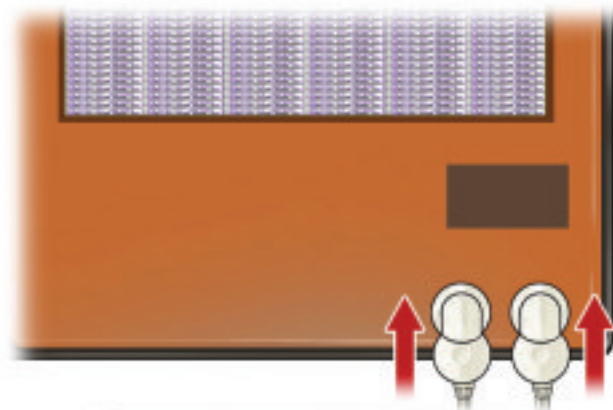

Tyto dvě velikosti mají dva konektory. Jeden pro levou a jeden pro pravou stranu, proto lze teplotu kontrolovat nezávisle na obou stranách.

***Teplotu lze nezávisle kontrolovat na obou stranách pomocí dvou ovladačů, nebo pomocí King nebo Queen ovladače s dvěma vývody a konektory.**




Připojení podložky Biomat a ovladače



Po připojení podložky Biomat a ovladače zasuněte zástrčku ovladače do zásuvky na stěně. Nyní jste připraveni k použití podložky Biomat.

Nikdy nezapomeňte poděkovat. Vděčnost je lék, který léčí vaše tělo i srdce.

Vždy používejte krycí povlak

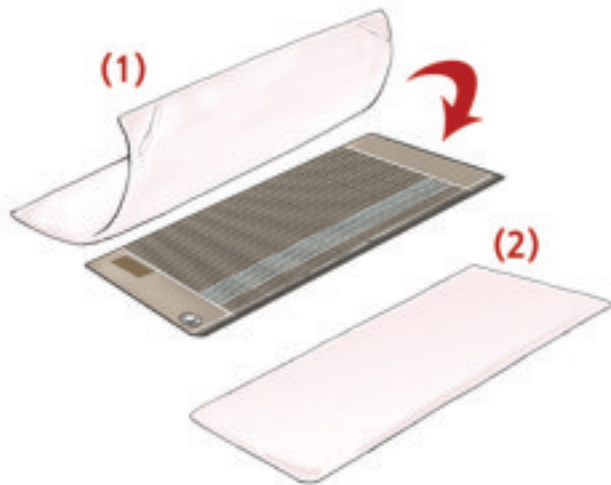

Kdykoliv používáte Biomat, použijte povlak. Povlak má antibakteriální funkci a maximalizuje léčebné účinky infračerveného záření.

***Pro maximální účinek hypertermie doporučujeme přikrýt celé tělo.**


Biomat – zapnutí přístroje 1



Po připojení podložky Biomat a ovladače zapněte hlavní vypínač na straně ovladače.

Každý den odpusťte jednomu člověku a můžete tím každý den vyléčit nemoc. (britské přísloví).

Jak ovládat tvorbu záporných iontů a dlouhovělného infračerveného záření

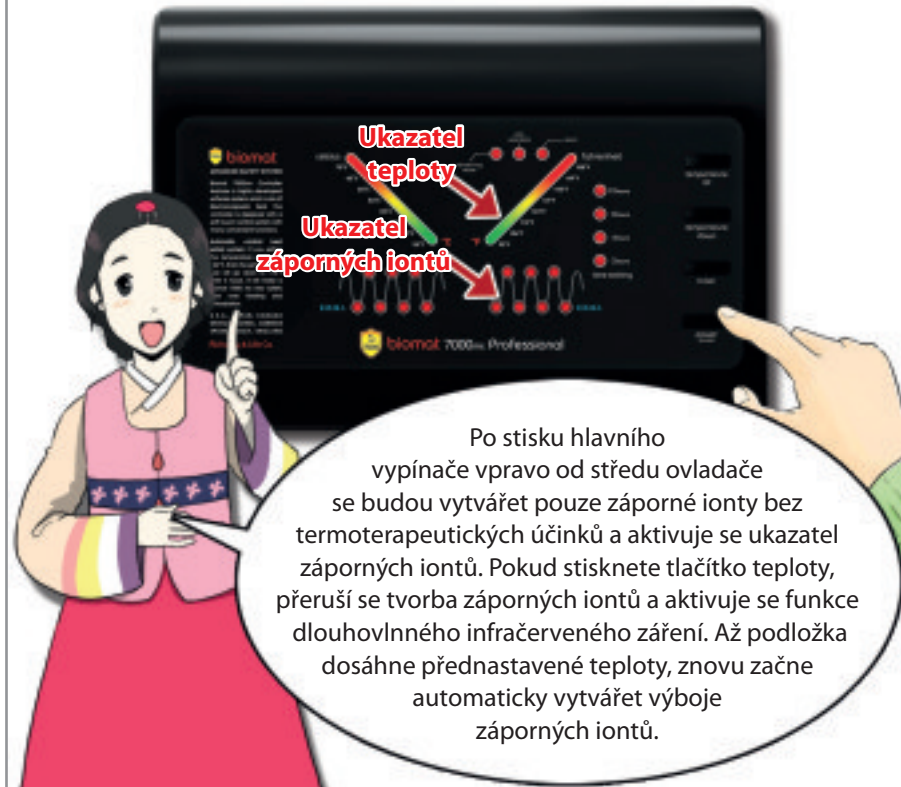

Jak nastavit časovač podložky Biomat



Temnotu lze překonat nejen bojem, ale i světlem.

Nyní nastavte teplotu podložky Biomat

**Tlačítko pro zvýšení
teploty**




**Tlačítko pro snížení
teploty**

Nyní musíte nastavit požadovanou teplotu podložky Biomat. Teplotu lze nastavit v rozsahu od 35 °C do 70 °C. Nastavení potvrďte na ukazateli teploty ve středu displeje.

***Po nastavení teploty se podložka Biomat ohřeje na příslušnou teplotu, kterou pak bude následně udržovat.**

Funkce blokování elektromagnetických vln podložky Biomat

Blokování elektromagnetických vln

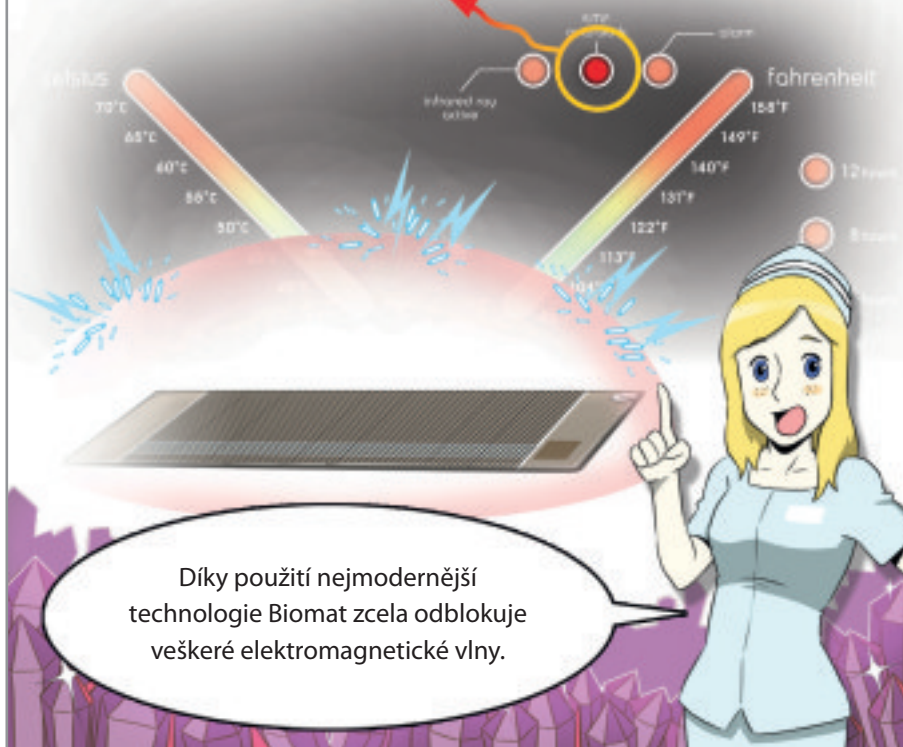

Díky použití nejmodernější technologie Biomat zcela odblokuje veškeré elektromagnetické vlny.

Hypertermie se používala již před několika tisíci lety a lékaři jí říkají diaforetická detoxifikační léčba.

Osvědčení o blokování elektromagnetických vln

Biomat, zdravotnický termoterapeutický prostředek, získal osvědčení KETI, mezinárodní organizace pro kontrolu elektromagnetických vln. Toto osvědčení potvrzuje, že produkt zcela blokuje elektromagnetické vlny.

KETI
Korea Electrotechnic Testing Institute

EMC TEST REPORT

Test Report No. : JP2007-8368

Applicant Information

Client	Richway B.V.
Client Address	PO BOX 10-4, SUN-ONG SANGBOK, CH, 40000, KOREA
Manufacturer	Richway B.V.
Manufacturer Address	PO BOX 10-4, SUN-ONG SANGBOK, CH, 40000, KOREA

ECIT Information

Inspector	Kim Hyeon professional electrical
Inspector	Kim
Serial No.	104
Trade Registration	104
Rating	104 100 0, 10 10
Receipt of the ECIT	1000, 10, 1000
Tested in person	1000, 10, 1000
Date of Issue	1000, 10, 1000

Test Specifications

ISO/IEC 17025 : Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure.

Test Report **Field**


1. The configuration tested for ECIT complied with the standards specified above.

Tested by (ECIT in Korea) *[Signature]*
J. H. No / Tester



Approved by (ECIT in Korea) *[Signature]*
C. H. Park / Team Leader

Remarks : This report details the results of the testing carried out on one sample. The results contained in this report do not extend to other samples of the same product. The manufacturer should ensure that all products in series production are in conformity with the product sample detailed in this report.

Při použití masážní oleje nebo vody u osob, které se nejsou schopny položit na podložku sami, doporučujeme použití vodotěsných podložek. Existují dva druhy vodotěsných podložek – pro Biomat Profesional (BMP) a Biomat Mini.

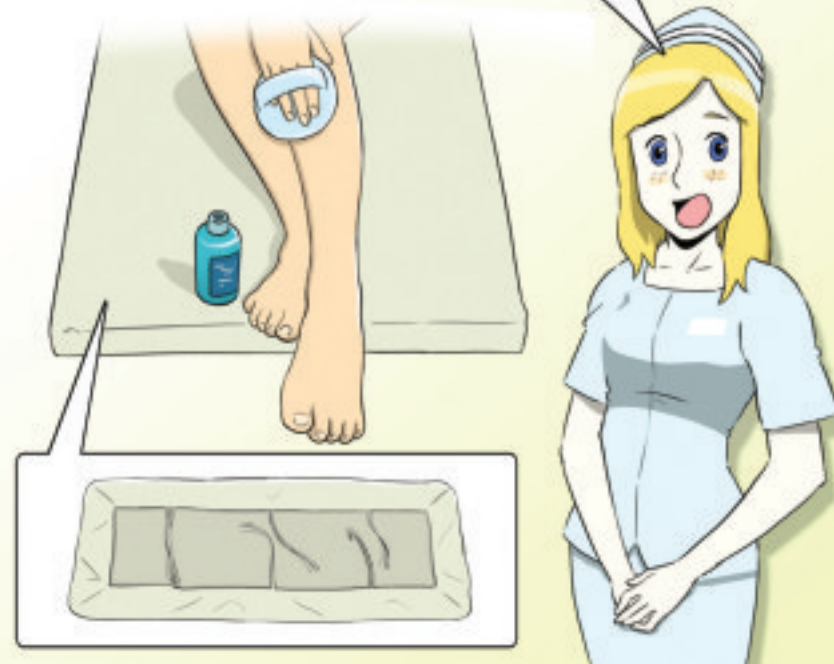

Léčebná hypertermie působí pozitivně na zlepšení metabolismu, správný oběh, při léčbě antibiotiky a zejména na detoxifikaci.

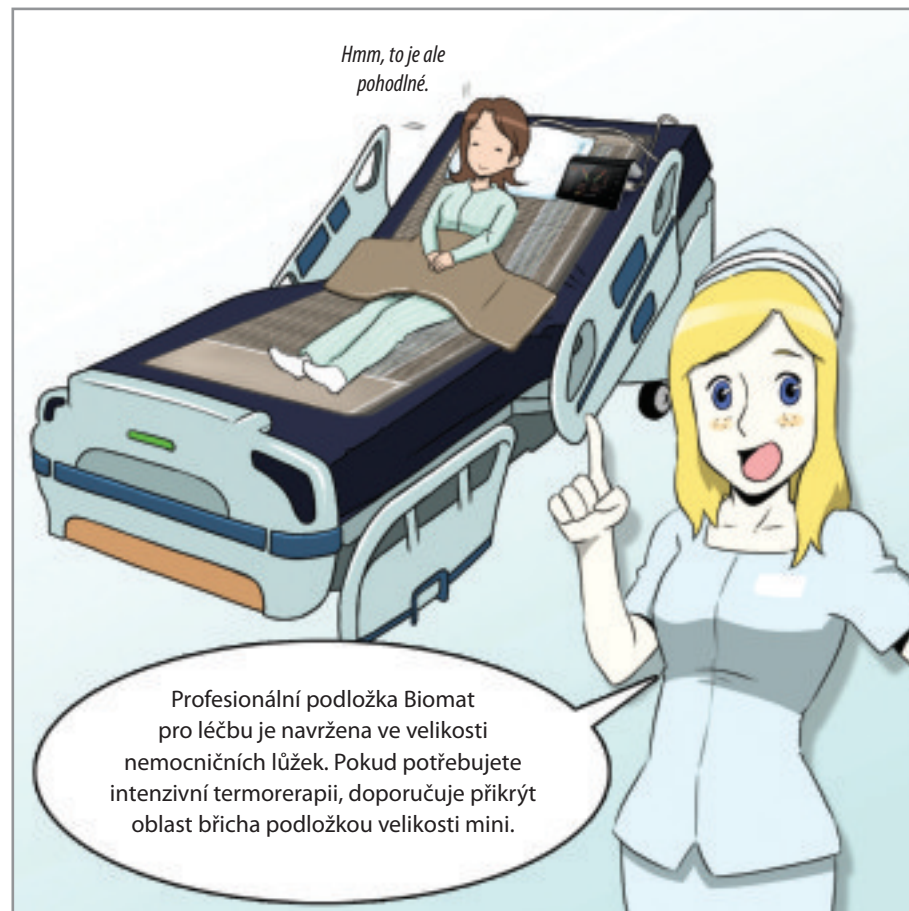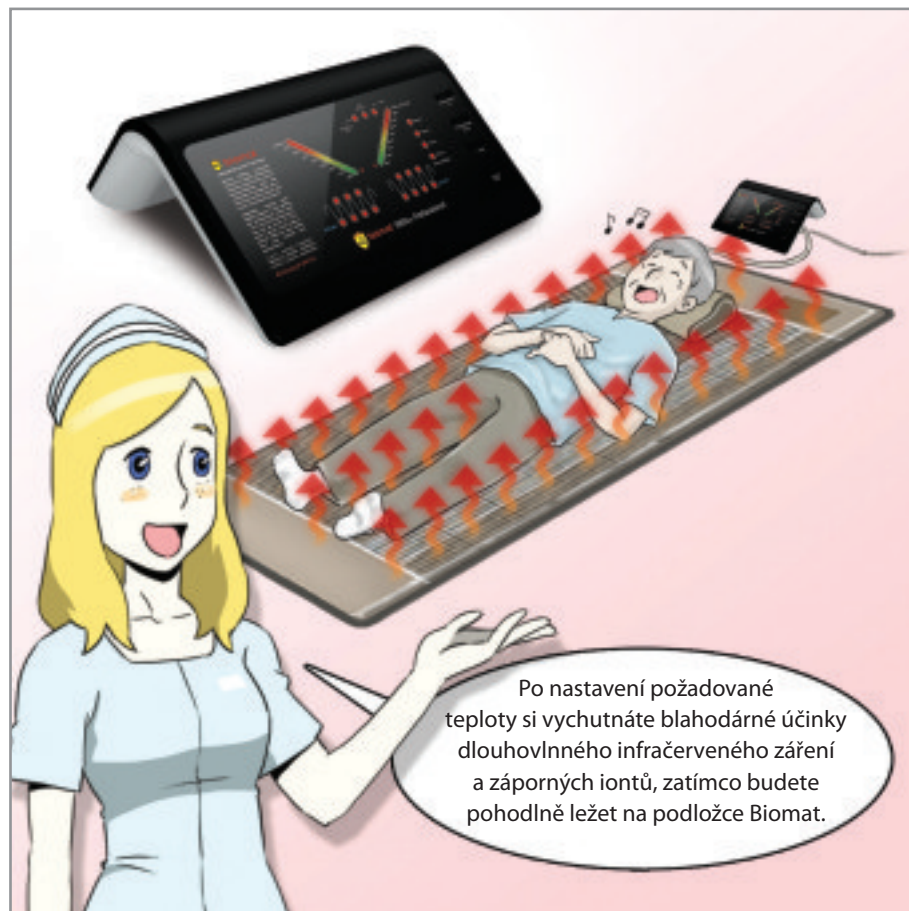

(O mrazení 1). Mrazení je zdrojem všemožných druhů nemocí.

Jak používat mini podložku



Mini podložka se snadno přenáší



(O mrazení 2). Mrazení v létě je horší než v zimě.


Mini podložku mohou použít i zvířata



Mnoho lidí používá mini podložky pro své mazlíčky. Při použití mini podložky u mazlíčků je třeba společně s mini podložkou použít vodotěsnou podložku.



Ametystový a turmalínový polštář vydává přírodní dlouhovlnné infračervené záření

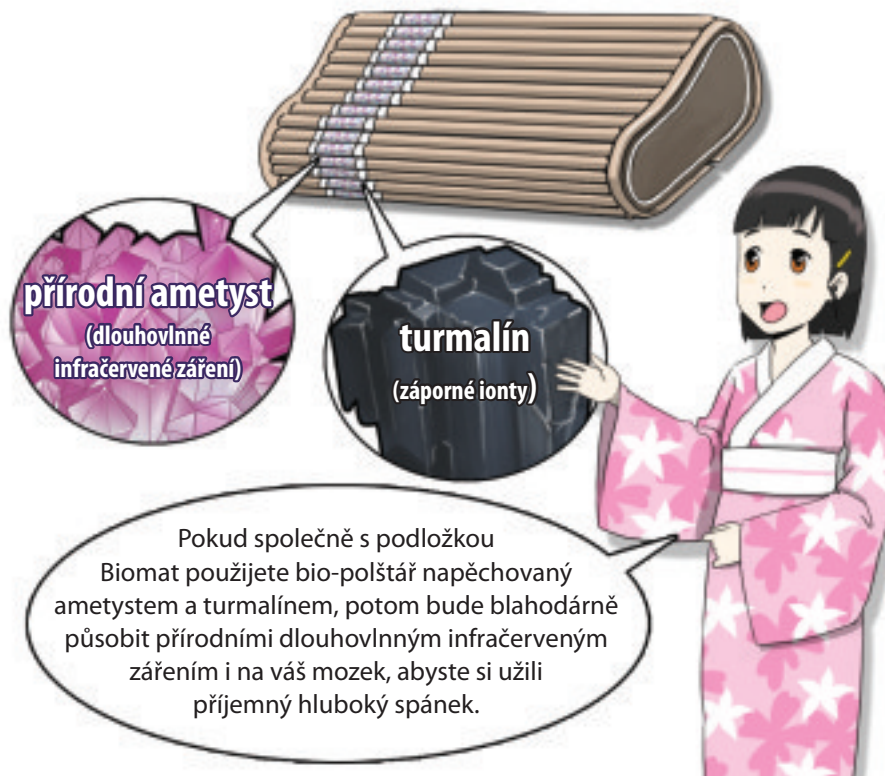

Pokud společně s podložkou Biomat použijete bio-polštář napěchovaný ametystem a turmalínem, potom bude blahodárně působit přírodními dlouhovlnným infračerveným zářením i na váš mozek, abyste si užili příjemný hluboký spánek.

Před intenzivní léčbou vypijte dostatečné množství vody nebo kvalitní slané vody



IONIZOVANÁ
SŮL

Před intenzivní termoterapií musíte vypít dostatečné množství vody nebo kvalitní slané vody, abyste předešli dehydrataci, protože se budete vydatně potit.

Před termoterapií užívejte iontovou sůl Detoxi

IONIZOVANÁ
SŮL



Kontroluje osmotický tlak v buňkách
Posiluje činnost ledvin
Zvyšuje iontovou aktivitu v těle

Detoxi 300 je ionizovaná sůl připravená jejím zahřátím na 1000 °C po dobu 300 hodin. Před použitím podložky Biomat se doporučuje, aby uživatelé užili ionizovanou sůl s vysokým obsahem kyseliny solné, neboť sůl může zvýšit terapeutický účinek dlouhodobného infračerveného záření a pomáhá buňkám a ledvinám kontrolovat osmotický tlak a podporuje aktivní detoxifikaci.

(O mrazení 4) Mrazení v těle způsobuje bolest. Řešením problému je pouze tělo zahřát.

Jak používat Biomat pro intenzivní léčbu



Tvorba HSP



(O mrazení 5) Mrazení těla způsobuje obezitu. Hlavní příčinou je ochlazení a ztuhnutí tuku.


Použití podložky Biomat pro intenzivní termoterapii a za nízkých teplot

Při intenzivní hypertermické terapii se položte na profesionální podložku a přikryjte si břicho mini podložkou. Nastavte teplotu na 70 °C a zůstaňte v této pozici po dobu 40 minut.

Tímto způsobem se začne vylučovat HSP. Chcete-li spát, nastavte teplotu na 40 °C. Pokud používáte Biomat ve spánku, vaše vlastní hojící schopnosti budou šedesátinásobně účinnější.


Při použití podložky Biomat musejí být obezřetné následující osoby

U dětí, lidí trpících diabetes nebo paralýzou, těhotných žen, kojících matek, nebo osob s bypasselem nebo kardiostimulátorem, vždy nastavujte Biomat na nízké hodnoty a vždy věnujte pozornost nastavení. Jste-li jednou z výš uvedených osob, poraďte se před použitím podložky Biomat se svým lékařem.

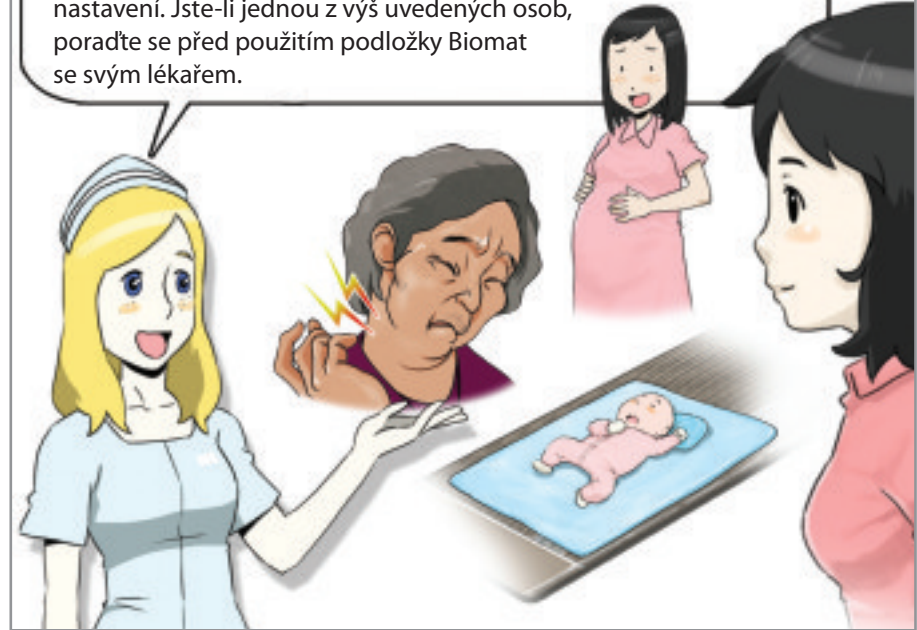

Děti je třeba vychovávat vroucně. (německé přísloví).

O reakci na léčbu

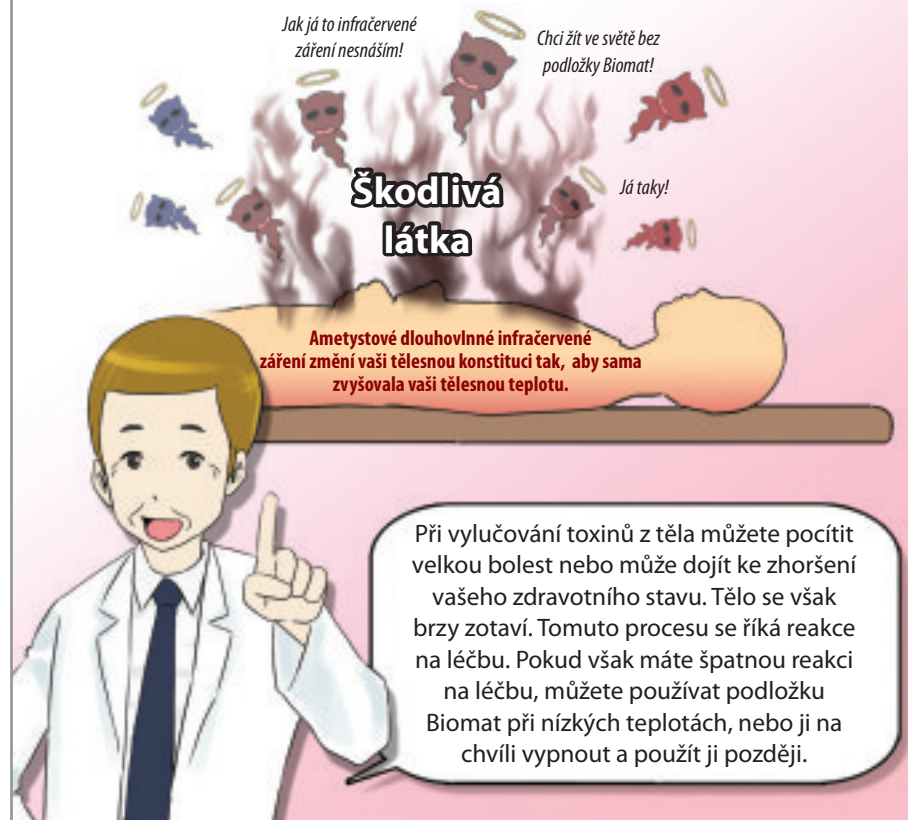

Jak podložku Biomat uchovávat



Pocit lásky začíná hřejivě (Francois Sagan).

Jak zabezpečit podložku Biomat při odchodu z domova




Skládejte podložku Biomat vždy stejným způsobem



Nízká tělesná teplota způsobuje špatný oběh kvůli ztuhnutí červených krvinek. To narušuje proces vylučování odpadu a toxických látek z těla, a proto je výsledkem celá řada nemocí. (Naoshi Ishibashi, lékař z lékařského institutu v Kóbe).

Neukládejte Biomat ve svislé poloze

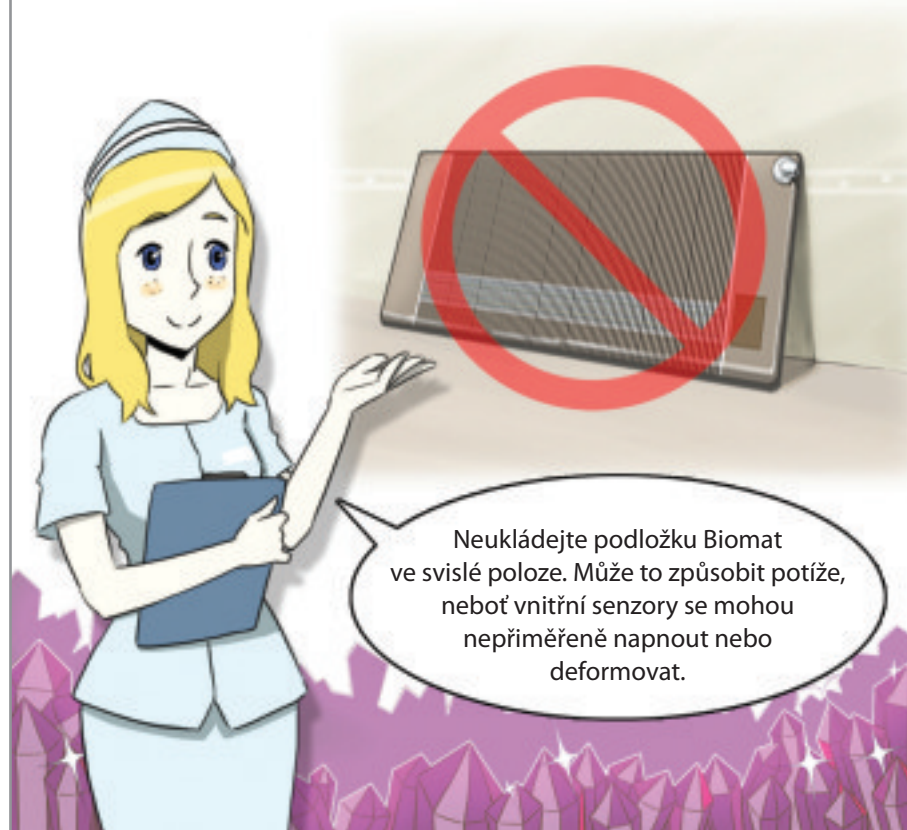


Nikdy Biomat neperte nebo nedávejte do čistírny



Hypertermie je účinná, pokud trvá alespoň 30 minut.

Povlak můžete vyprat

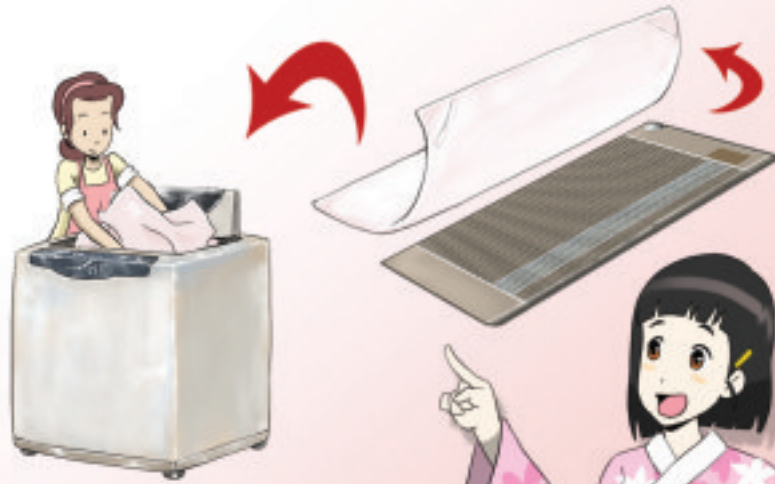

Z podložky můžete stáhnout povlak a vyprat samostatně. Vypraný povlak pověste a usušte.

Při čištění ovladače postupujte opatrně



Při čištění ovladače nepoužívejte mokré hadříky. Při vniknutí vody do produktu může dojít k požáru nebo jiným problémům. Také nepoužívejte rozpouštědla, benzen nebo vosk. Může to způsobit změnu barvy nebo tvaru ovladače.

Hypertermie je mocnou zbraní, kterou může tělo použít proti nemocem.

Nepoužívejte ovladač jiného výrobce

Ovladač jiného
výrobce

K ovládání podložky Biomat použijte pouze k tomu určený ovladač dodávaný v balení. Při použití ovladače jiného výrobce může dojít k požáru nebo mohou nastat jiné problémy.

Nepokládejte ovladač na Biomat, nebo pod pokrývku

Nedoporučujeme pokládat ovladač na Biomat nebo pod pokrývku.

Kdykoliv se teplota těla zvýší o 1 °C, vzroste rychlost metabolické výměny o 100 %. Tato rychlejší metabolická výměna zvyšuje produkci interleukinu, protizánětlivé látky.

Neskákejte na Biomatu



Přístroj sami nerozebírejte



Hypertermie, která léčí nemoci zvýšením tělesné teploty, vynesla Dr. Cooleymu v roce 1920 Nobelovu cenu.

Nepřipustěte zamotání elektrického kabelu




Nepokládejte těžké předměty na Biomat

*Mocný Biomat není schopen
správně fungovat pod mojí
velkou váhou na malé části!*




Hypertermie je zdrojem, v němž lze najít lék k všemožným nemocem (Parmenidés, lékař z Řecka, 500 př. n. l.)

Objednejte si elektrický kabel podle toho, v jaké zemi žijete

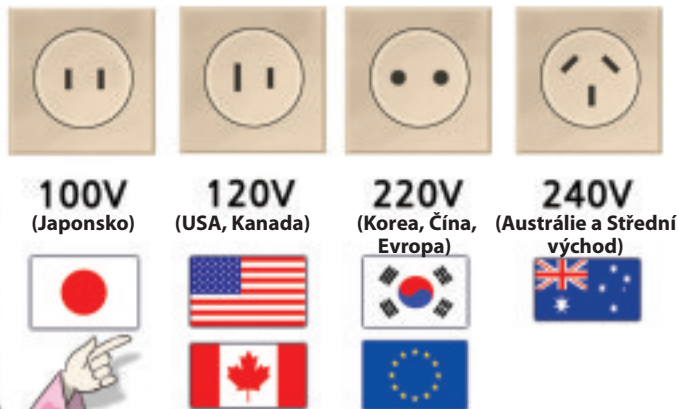

Tento produkt je vyráběn pro napětí 240 V, 220 V, 120 V a 100 V dle elektrické normy pro jednotlivé země. Pokud nám sdělíte, v jaké zemi žijete, pošleme vám zdarma odpovídající produkt. Pokud se pokusíte produkt připojit do elektrické zásuvky s jiným napětím, můžete jej poškodit.


Jak produkt připojit do zásuvky

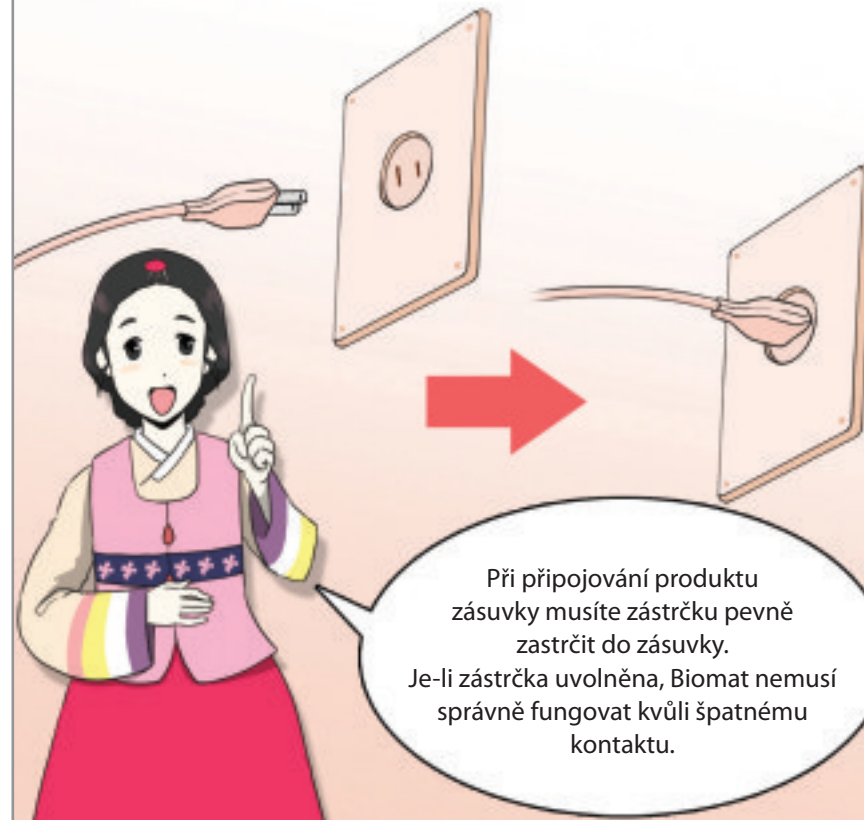


Při připojování produktu zásuvky musíte zástrčku pevně zastrčit do zásuvky. Je-li zástrčka uvolněna, Biomat nemusí správně fungovat kvůli špatnému kontaktu.

Parmenida můžete využít k léčbě řady druhů onemocnění jako doplňkovou terapii, protože prospívá tělesné teplotě a srdeční činnosti (Dr. Douglas Louis z USA, 1970).

Čemu je třeba věnovat pozornost při zapojování produktu do elektrické sítě

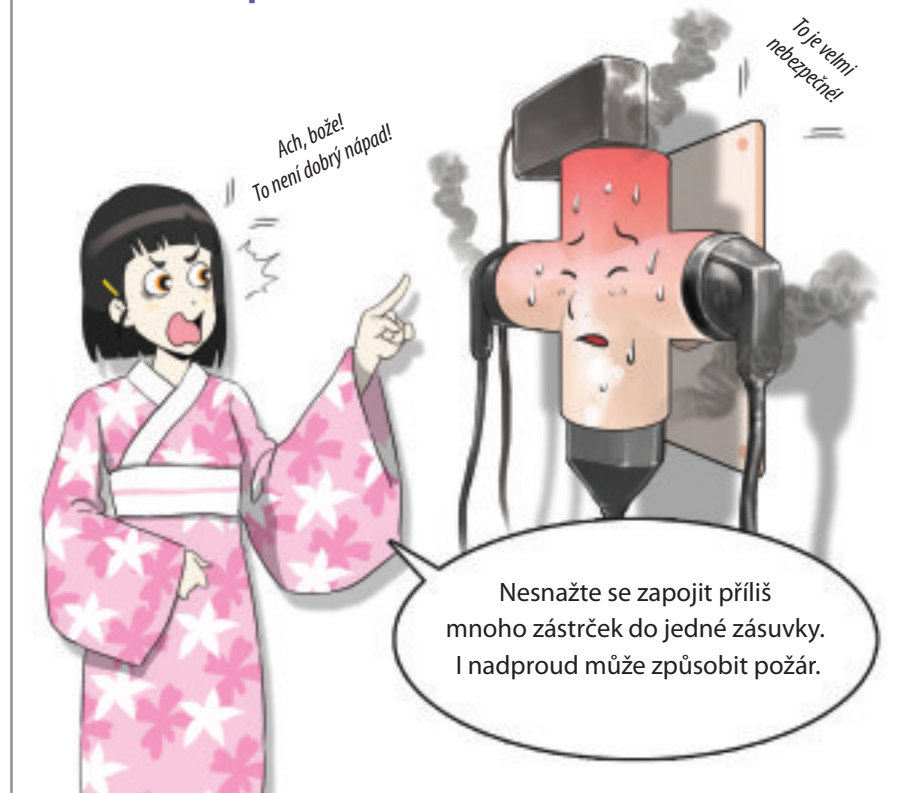

Zástrčku nezapojujete do sítě mokřými rukama

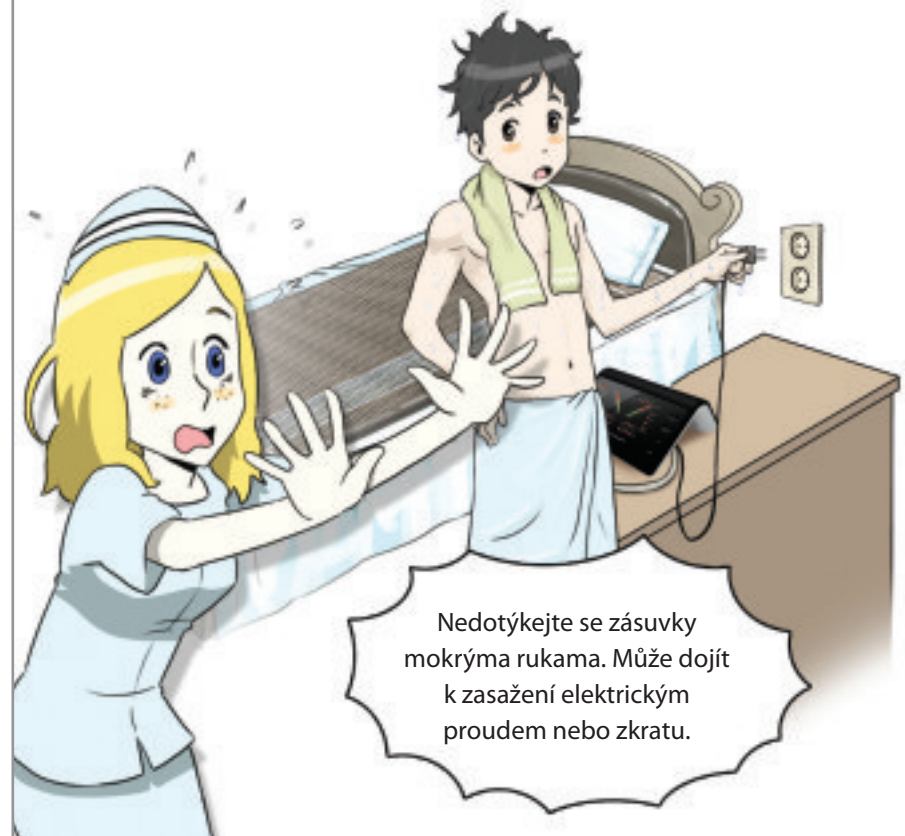

Hypertermie je jistý druh detoxifikace. Týká se neutralizujících pesticidů, herbicidů a drog a je to účinný způsob vylučování toxických látek z těla, primárně přes kůži a dále skrz střeva a ledviny. (Dr. Gard, Cancer Support Center, USA)



Biomat získal ocenění OSN


Podložka Richway Biomat byla oceněna OSN za přínos v oblasti zlepšování zdravotní péče po celém světě.



Richway získala požehnání papeže Benedikta XVI za svůj přínos v oblasti zdravotnických prostředků

Svatý otec Benedikt XVI srdečně uděluje vyžádané apoštolské požehnání Dr. Jeannu Chunu Kimovi ze společnosti Richway International Inc., za získání ocenění OSN za zásadní přínos v oblasti zlepšování zdravotní péče a dovolává se přízně nebes a trvalé ochrany svaté Panny Marie.

Ve Vatikánu dne 6. května 2009

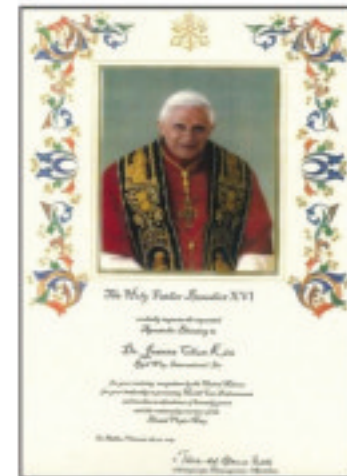

Richway získala požehnání papeže Benedikta XVI za svůj přínos při záchraně řady dětí nakažených virem HIV v Africe a za léčbu těžko vyléčitelných chorob po celém světě.

Hypertermii můžete nazývat imunoterpií. (Dr. Denbayashi, Gyohokul Hospital)

Ocenění japonské kulturní agentury od prince Husimiho



Richway Japan získala od prince
Husimiho ocenění japonské
kulturní agentury za svůj přínos
v oblasti propagace zdravotní
péče mezi japonským lidem.

Obchodník roku dle Wall Street Journal




V roce 2006 byl
Calvin Kim ze společnosti
Richway zvolen časopisem Wall
Street Journal, uznávaným
periodikem v USA,
obchodníkem roku.

Bylo potvrzeno, že hypertermie zesiluje účinky radioterapie. (Ellen Jones, lékař z Duke University Medical Center, The Wall Street Journal, 28. října 2007)

Společnost Richway byla pozvána do Bílého domu



Biomat získala souhlas 510 (k) k použití jako zdravotnického prostředku od US Food and Drug Administration

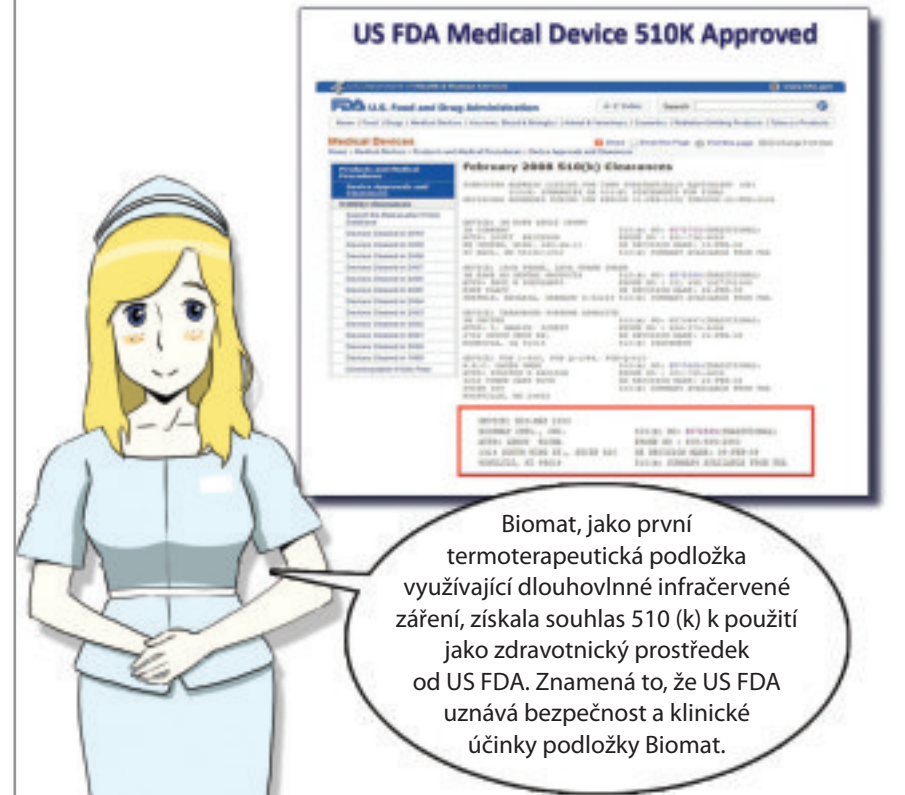

V roce 1991 šedesát procent ze šesti set pacientů v tokijské ženské lékařské univerzitě zažilo blahodárné účinky prodlužující život během 1000 hypertermických terapií

Osvědčení od korejského úřadu pro potraviny a léčiva, korejského GMP a korejského sdružení pro elektrickou bezpečnost

Podložka Biomat získala osvědčení zdravotnického prostředku od korejského úřadu pro potraviny a léčiva a bezpečnostní osvědčení od korejského sdružení pro elektrickou bezpečnost a rovněž certifikaci GMP, osvědčení CE a ISO 13485 – osvědčení zdravotnického prostředku.



Biomat schválena ministerstvem sociální péče Japonska a elektrickou zkušební laboratoří

Podložka Biomat byla schválena japonským ministerstvem zdravotnictví a sociální péče, které pro zdravotnické prostředky uplatňuje nej přísnější kritéria na světě a rovněž získala osvědčení japonské elektrické zkušební laboratoře.



Hypertermie může pomoci překonat jakoukoliv nemoc. Nemoci, které nelze léčit hypertermií, jsou nevyléčitelné (Hippokratés, 450 př. n. l.)

Biomat získal hlavní cenu v oblasti zdravotnických prostředků od Královské Švédské Akademie Věd, která vybírá kandidáty na Nobelovu cenu



Společně s podložkou Biomat, uznávanou po celém světě...



Vám pak, kteříž se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti, a zdraví bude na paprscích jeho. Tedy vycházeti budete, a porostete jako telata vykrmená. (Malachiáš 4:2)

Na Biomatu můžete ležet jak na zádech tak i na břiše



THE RICHWAY GROUP



Schopnost rozeznání, aktivity a rozmnožování, tři hlavní vlastnosti imunocytů, závisí na udržování těla v teple. Nízká teplota těla způsobuje zánik imunocytů a vytváří letargický stav. (Ishihara, lékař „The Warm Body Saves Your Health“)

Biomat





ALFIDA s.r.o.
Přímý a výhradní
dovozce Biomat
„RichWay“ pro EU

J. A. Komenského 692
250 88 Čelákovice, ČR
info@richwayeu.com
tel.: +420 326 995 453
mobil: +420 777 892 225

www.richwayeu.com

Biomat

Přírodní Ametystové infračervené záření a Záporné lonty



Všichni si zasloužíme aby se nám rány zahojily, abychom zmírnili následky procesu stárnutí a předešli nemocem.

Richway International Inc., jméno, kterému můžete důvěřovat.

